


Thermomac

Santrifüj TMS Serisi

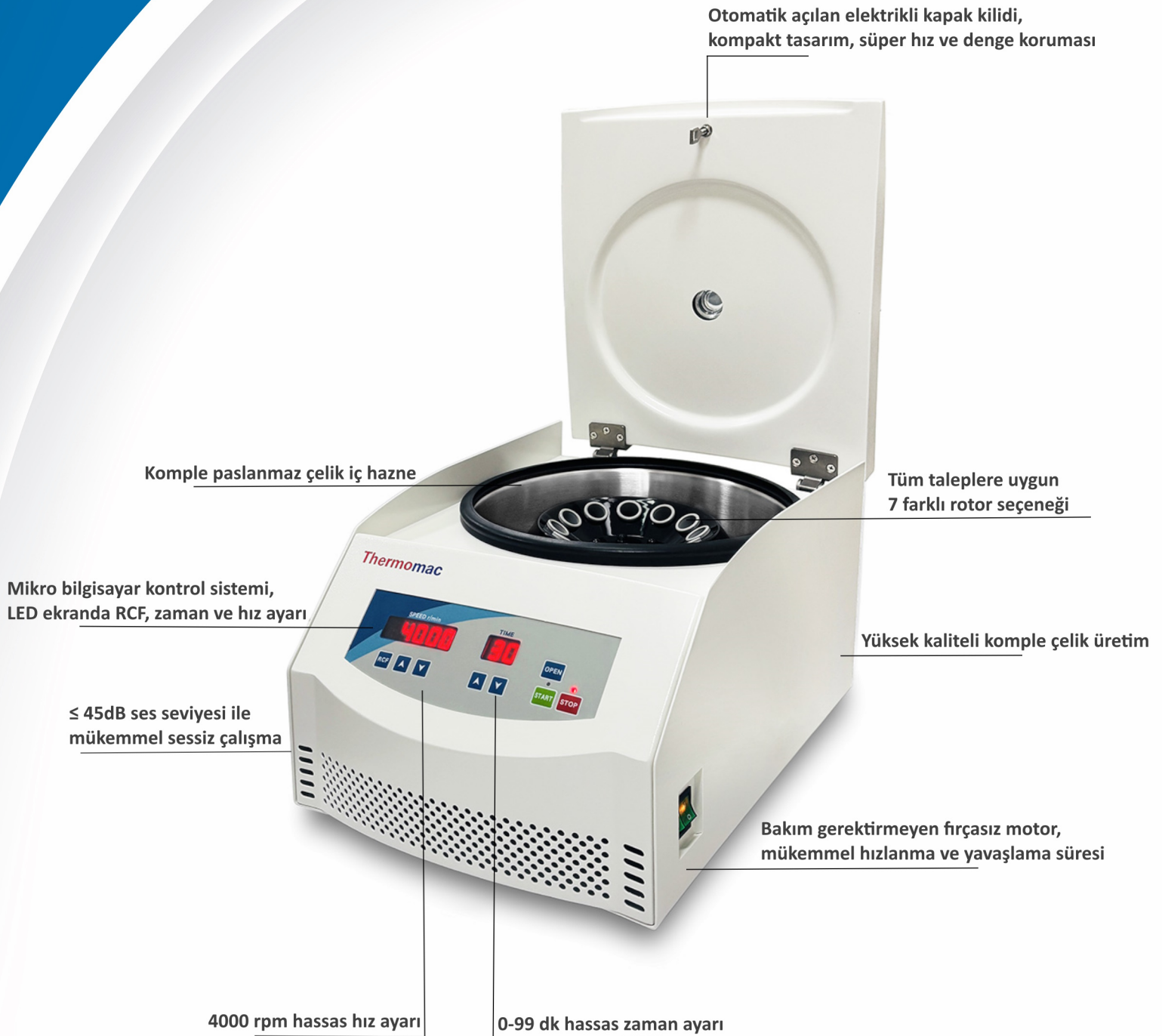

Özellikleri

- Uzun ömürlü ve verimli çalışmayı sağlayan, bakım gerektirmeyen, karbon fırçasız bir motora sahiptir
- Bu motorlar daha az gürültü ve titreşim üreterek daha sessiz ve daha konforlu bir çalışma ortamı sağlar
- Yüksek kaliteli çelik gövdesi ve paslanmaz çelik iç bölmesi sağlamlık, uzun ömürlü kullanım ve kolay temizlik sağlar
- Paslanmaz çelik, korozyona ve sert kimyasallara karşı oldukça dirençlidir ve santrifüjün zaman içinde bütünlüğünü ve performansını korumasını sağlar
- Üst pencere, hızı ve zamanı kontrol etmeyi kolaylaştıran 7 bölümlü LED ekranla tamamlanan bir takometre ile RPM'i izlemenize olanak tanır
- Hızlanma ve yavaşlama seviyeleri programlanabilir ve RPM ve/veya FCR'de hassas ayarlar sunar
- Dengesizlik ve aşırı sıcaklığa karşı koruma, kapağın açılıp kapanmasını sağlayan güvenlik sistemi ve işlem bittiğinde otomatik açılan elektronik kilit ile güvenlik garanti altına alınmıştır
- Ek olarak işlem sonunda sesli bir alarm vererek kullanıcıyı uyarır
- Döngüyü kesintiye uğratmadan RPM'i izleme yeteneği, çalışma süresini azaltır ve laboratuvar verimliliğini artırır
- Kullanıcıların farklı gereksinimlerini karşılayan, tüm özelliklere ve seçimlere uygun birçok rotor seçeneği bulunmaktadır
- Rotoru doğrudan yöneten esnek aks sistemi, yumuşak çalışma ve düşük titreşimde sessiz çalışma olanağı sunar
- Kontrollü yüksek hız ve eşsiz özellikleri ile kullanıcı dostu bir performans sunar
- Hastane, kan merkezi, laboratuvar ve biyokimya alanlarında kan serumu, plazma ve ürenin kalitatif analizi başta olmak üzere tüm araştırma merkezleri ve laboratuvarlarda yaygın olarak kullanılmaktadır



Teknik Özellikleri

Ürün Kodu	TMS4A
Max. Hız	4000 rpm
Max. RCF	2250×g
Zaman Aralığı	0-99 dk
RPM/RCF Dönüştürme	Var
Ses (dB)	≤ 45
Hız Doğruluğu	±20r/dk
Voltaj	AC 220V/110V 50HZ/60HZ
Boyut	485×320×255mm
Ağırlık	20 Kg

Aksesuarlar

TMS174 : 12x10ml Tüpler İçin



TMS175 : 18x10ml Tüpler İçin



TMS177 : 12x15ml Tüpler İçin



TMS178 : 30x5ml Tüpler İçin



TMS198 : 12x20ml Tüpler İçin



TMS180 : 6x50ml Tüpler İçin



TMS176 : 24x10ml Tüpler İçin

