

Yüksek parlaklığa sahip dijital ekran, parametrelerin kolayca ayarlanabilmesi için hassas klavye.

PID tek çipli mikroişlemci kontrol paneli ile zamanlama ve yüksek sıcaklık koruması fonksiyonuna sahiptir.

Saklama, ısıtma, test ve kurutma işlemi oksijensiz ortamda yapılabilir ya da gaz ekleme işlemi oksidayson olmadan sağlanabilir


4 taraflı ısıtma yöntemi ile raflara sıcaklık iletimi daha fazla verimlilikle yapılır.

Paslanmaz çelik iç hazne, kolay temizlik için köşelerde yarım daire kavisler.

Sabitlenme kolu sayesinde kapak pratik bir şekilde açılıp, kapanabilir.

Patlamaya dayanıklı cam kapı, yüksek sıcaklığa dayanıklı silikon kauçuk sızdırmazlık şeridi sayesinde termal kararlık ve vakum derecesini uzun süre muhafaza edebilir.

Dış gözlem penceresi, daha fazla güvenlik sağlamak adına koruyucu reçine plaka ile kaplanmıştır.

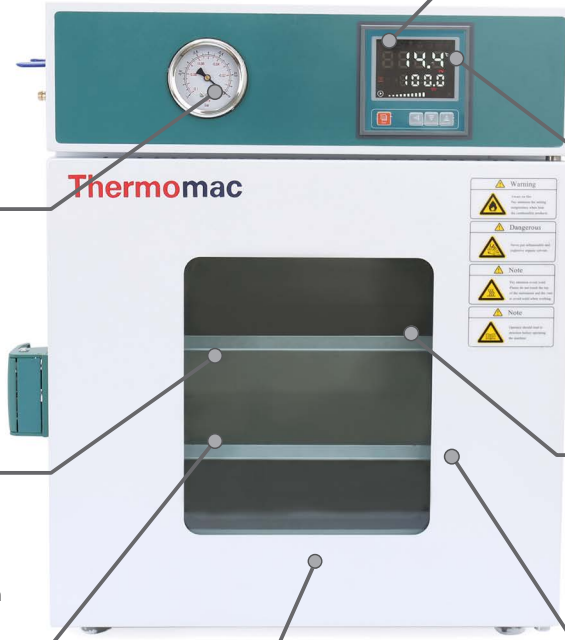

Teknik Özellikleri

Model	VO24	VO52	VO91
Kapasite	24 Litre	52 Litre	91 Litre
Isıtma Modu	Dört duvarlı ısı iletimi ve dekompresyon		
Voltaj (V)	100~120V/50~60Hz & 200~240V/50~60Hz		
Isıtıcı Gücü (kw)	0.8		
Sıcaklık Aralığı	RT+10~250°C		
Sıcaklık Çözünürlük Oranı	0.1°C		
Sıcaklık Değişimi	±1%		
Isıtma Süresi	80 Dakika	100 Dakika	120 Dakika
Vakum Derecesi	<133pa		
İç Hazne Boyutu (ExBxY)	300x300x270	415x370x340	450x450x450
Dış Boyutlar (ExBxY)	480x480x605	560x540x680	640x590x780
Paketleme Boyutu (ExBxY)	610x550x710	704x620x814	739x700x888
Net Ağırlık (kg)	42	67	82
Raf Başına Yük (kg)	15		
Güvenlik Ekipmanı	Aşırı sıcaklık ses-ışık alarmı		



Model	VP-24	VP-91
Egzoz Çıkış Hızı (L/S)	2	4
Voltaj (V)	220/380	220/380
Motor Gücü (kW)	0.37	0.55
Giriş Çapı (mm)	Q25	Q25
Yağ Kapasitesi (L)	0.8	1
Devir (rpm)	1400	1400
Gürültü Seviyesi	< 60.0 dB	< 60.0 dB
Net Ağırlık (kg)	20	23
Boyutlar (BxExY)	488x145x280	528x145x280